


fasciotens®Abdomen

# Guida rapida



**Suggerimento:**  
Tenere la Guida rapida  
vicino al paziente,  
a disposizione del  
personale ospedaliero.

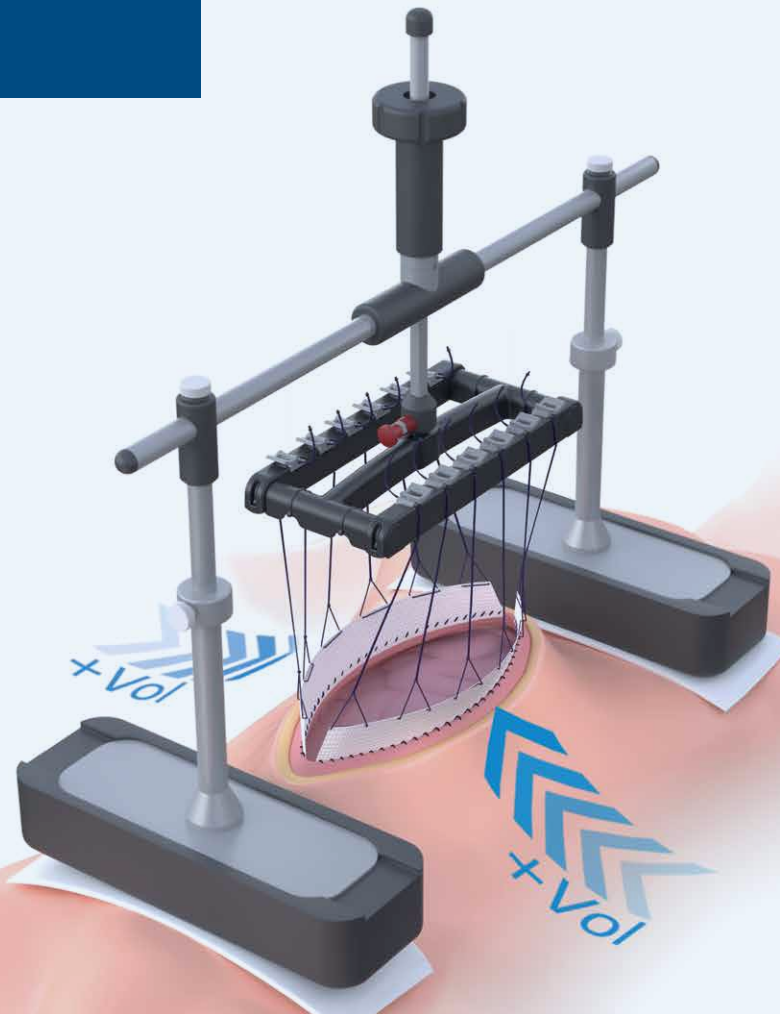



**fasciotens**  
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

## Struttura del prodotto


▲ All'inizio del montaggio ruotare verso l'alto il volantino nero fino a quando arriva a contatto del tappo terminale.

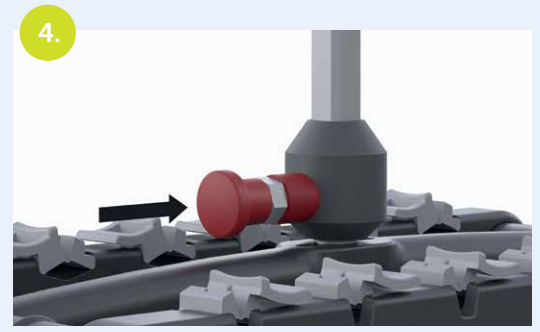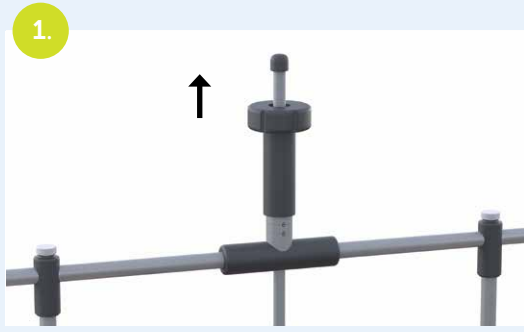

## Regolazione in altezza e in lunghezza (facoltativa)

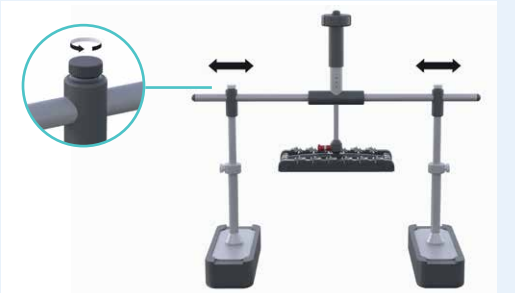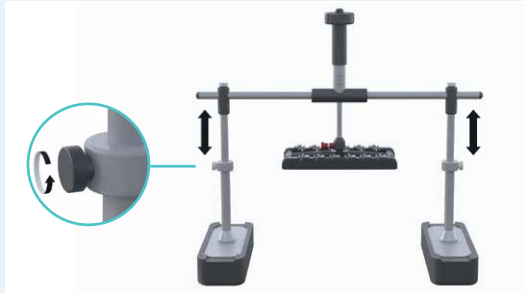

## Regolazione della trazione




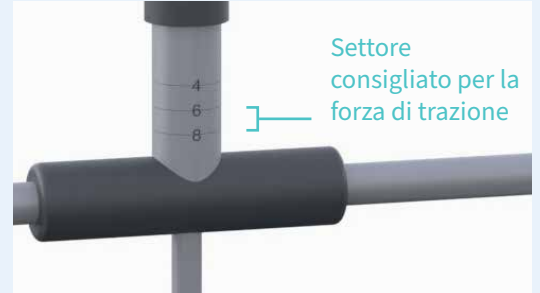


▲ Per regolare la forza di trazione ruotare il volantino nero.





▲ Controllare regolarmente la forza di trazione e, se necessario, riportarla nel settore definito in precedenza.

## Serraggio dei fili

▲ Controllare la tensione di base di tutti i fili. Se necessario, serrare nuovamente i fili.

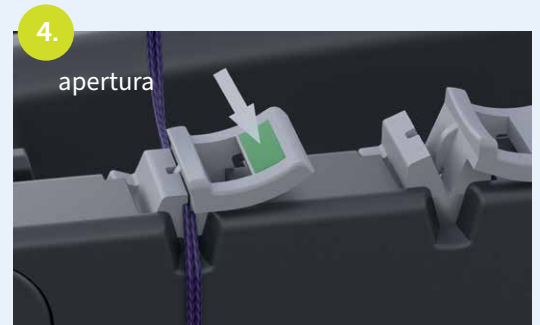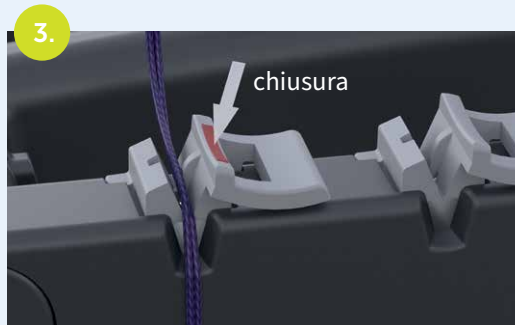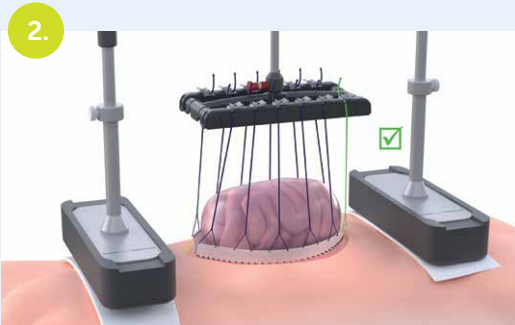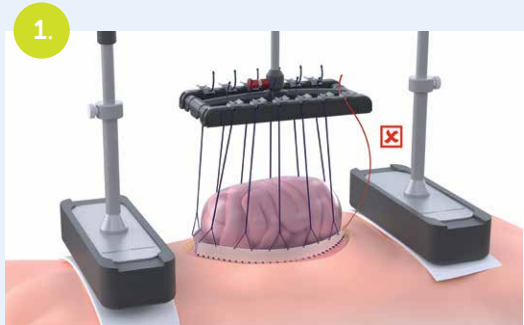

## Smontaggio nella manutenzione quotidiana (e in caso di emergenza)

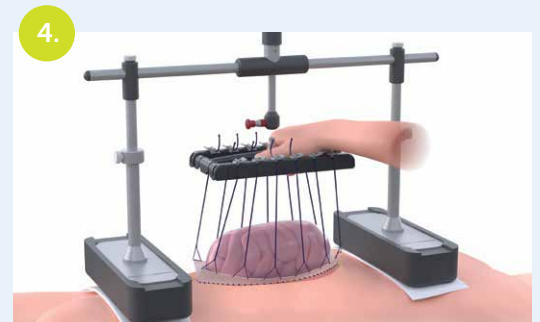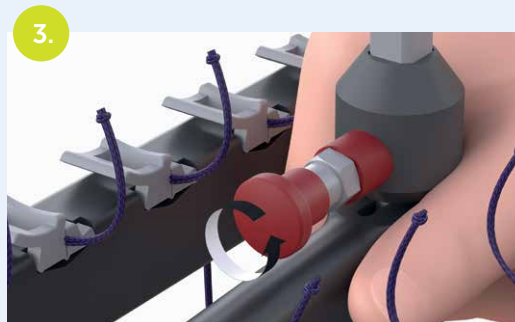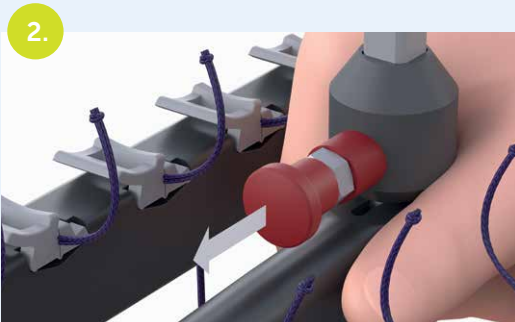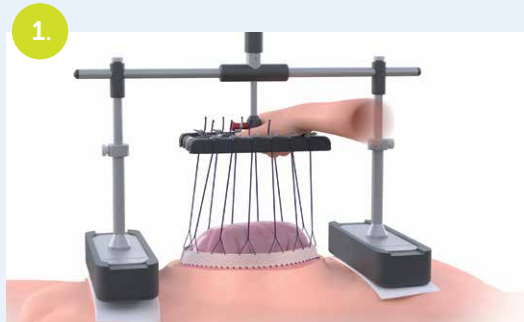

Tenere il portafili con una mano.

Estrarre la manopola di bloccaggio rossa.

Ruotare di 90 gradi.

Il portafili si allenta e può essere rimosso verso il basso.

## ▲ Altre indicazioni di sicurezza

Le piastre di contatto devono essere appoggiate solo su cute integra.


Assicurarsi che non vi siano corpi estranei sotto le piastre di contatto, come ad esempio cavi, elettrodi, linee di alimentazione o drenaggio o altro.

Imbottire sempre le piastre di contatto con grosse compresse assorbenti o materiali simili, evitando di formare pieghe.

Il prodotto non deve essere posizionato sui genitali.

Per evitare irritazioni cutanee si raccomandano periodi di trazione di circa 5 ore, seguiti da un'ora di pausa.

Tutorial video

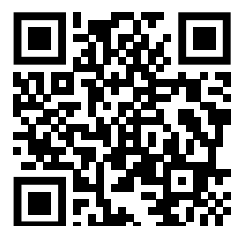

**fasciotens**  
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

Attenersi alle istruzioni per l'uso!

# fasciotens

ABDOMINAL WALL SOLUTIONS



**fasciotens GmbH**

Moltkeplatz 1

D-45138 Essen | Germany

**[www.fasciotens.de](http://www.fasciotens.de)**

[info@fasciotens.de](mailto:info@fasciotens.de)

Tel. +49 221 17738500

**Assistenza:**

[support@fasciotens.de](mailto:support@fasciotens.de)

Tel.: +49 221 17738500

**fasciotens GmbH**

Aachener Str. 1053-1055

D-50858 Köln | Germany