


fasciotens®Abdomen

Quick Guide

Tip:
Breng de Quick Guide
in de buurt van de
patiënt aan om het
behandelingsteam te
informereren.

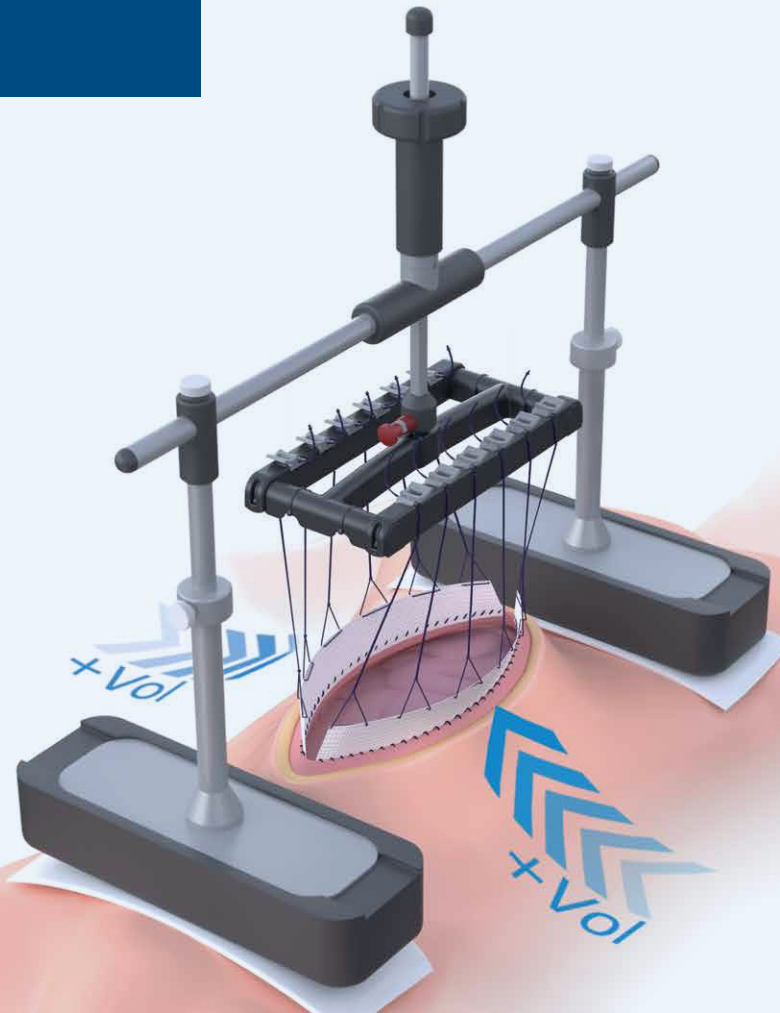

fasciotens
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

Productopbouw

⚠ Voor het begin van elke nieuwe installatie het zwarte handwiel naar boven draaien tot het op gelijke hoogte met de eindkap is gesloten.



Verstelling van hoogte en lengte (optioneel)




Trekkrachtregeling




- ⚠ Draai aan het zwarte handwiel om de trekkracht in te stellen.
- ⚠ Regelmatige controles van de trekkracht worden aanbevolen; regel dit indien nodig terug naar het eerder gedefinieerde bereik.

Draden vastklemmen

⚠ De basisspanning van alle draden moet worden gecontroleerd. Indien nodig moeten draden opnieuw worden aangespannen.

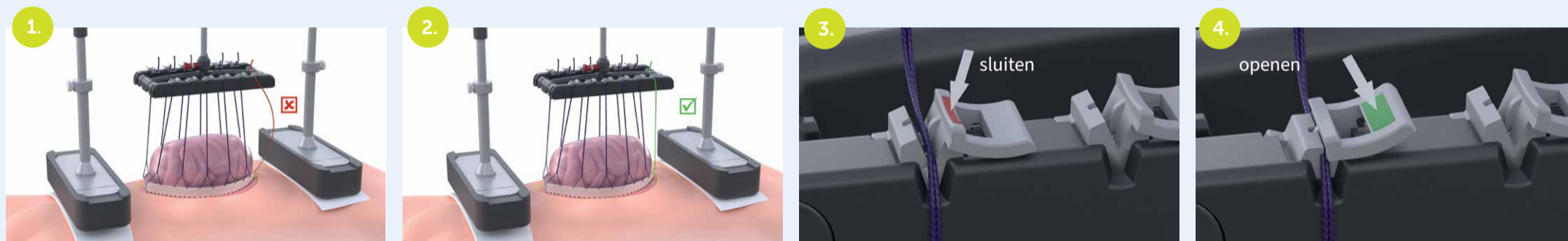

Demontage bij de dagelijkse verzorging (en in geval van nood)

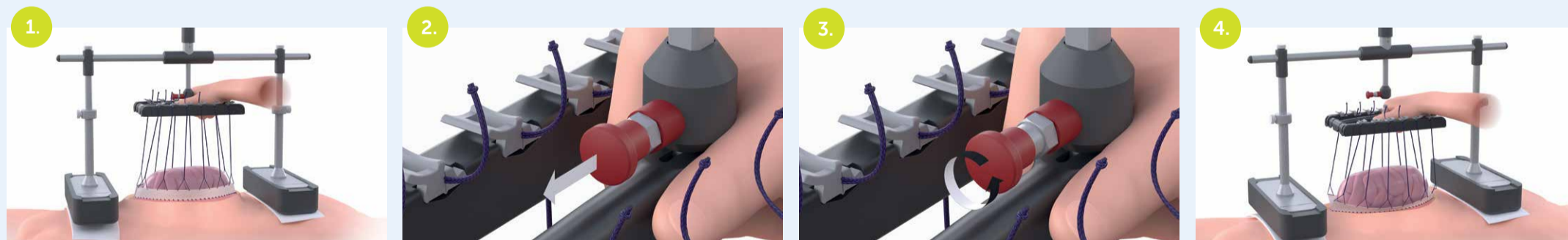

1. Bevestig de draadhouder met één hand.

2. Trek de rode borgpen naar buiten.

3. Draai deze 90°.

4. De draadhouder komt los en kan naar onderen toe verwijderd worden.

⚠ Bijkomende veiligheidsaanwijzingen

De draagvlakken mogen uitsluitend op intacte huid worden aangebracht!

Het is belangrijk dat er geen vreemde voorwerpen onder de draagvlakken komen te zitten, zoals bijv. kabels, elektroden, toevoer- of afvoerleidingen.

Vul de draagvlakken altijd met grote, kreukvrije, absorberende kompressen of soortgelijke kreukvrije materialen.

Het product mag niet op de geslachtsdelen worden geplaatst.

Om huidirritatie te vermijden, worden tractie-intervallen van ongeveer 5 uur gevolgd door een pauze van een uur aanbevolen.

Instructievideo



fasciotens
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

fasciotens

ABDOMINAL WALL SOLUTIONS



fasciotens GmbH

Moltkeplatz 1

D-45138 Essen | Duitsland

www.fasciotens.de

info@fasciotens.de

Tel. +49 221 17738500

Support:

support@fasciotens.de

Tel.: +49 221 17738500

fasciotens GmbH

Aachener Str. 1053-1055

D-50858 Keulen | Duitsland