


fasciotens®Abdomen

# Hızlı Kılavuz

**İpucu:**  
Tedavi ekibi hakkında  
bilgi sağlama için  
Hızlı Kılavuz'u hastanın  
yakınına getirin.

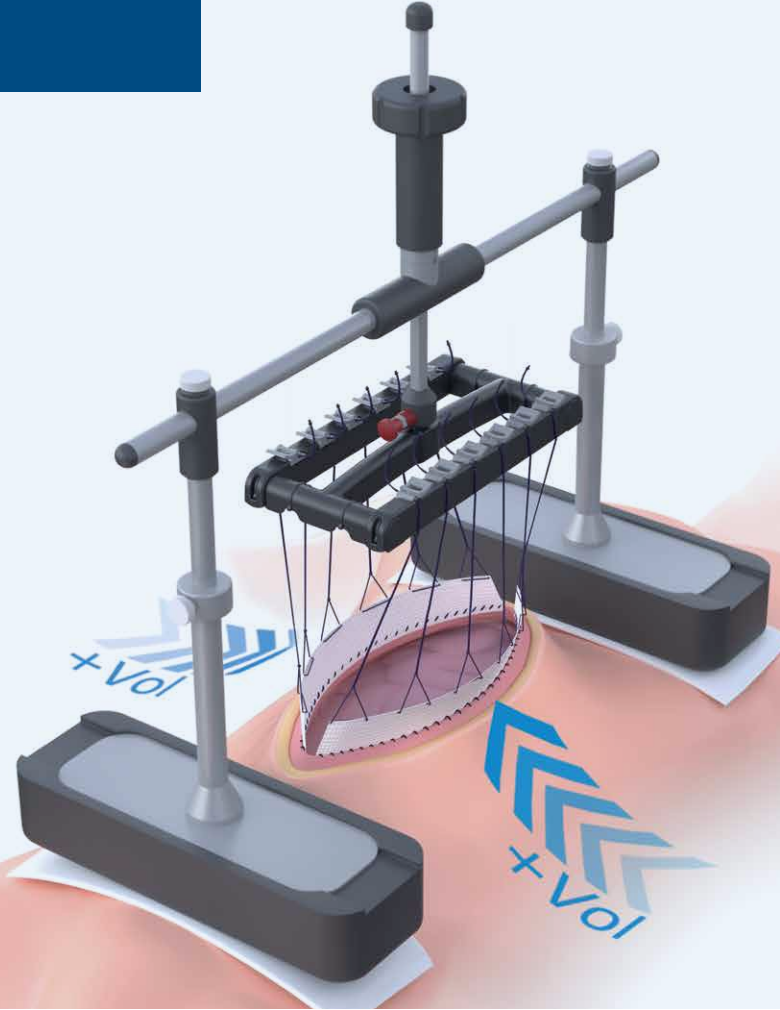

**fasciotens**  
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

## Ürün yapısı


⚠ Yeni kurulumla başlarken, siyah parmak çarkını, uç kapağıyla aynı hizaya gelene kadar yukarı doğru çevirin.



## Yükseklik ve uzunluk ayarı (opsiyonel)



## Çekme kuvveti ayarı

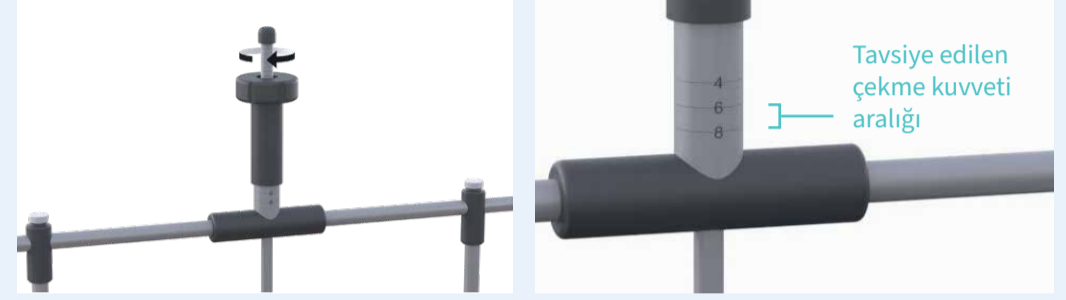

⚠ Çekme kuvvetini ayarlamak için siyah parmak çarkını çevirin.


⚠ Düzenli çekme kuvveti kontrolleri gerçekleştirin ve gerekirse bunu önceden belirtilen alanda ayarlayın.

## Sütürlerin gerilmesi

⚠ Tüm sütürler temel gerilim bakımından kontrol edilmelidir. Gerekli durumda sütürler tekrar gerilmelidir.



## Günlük bakımda (ve acil durumda) sökme işlemi

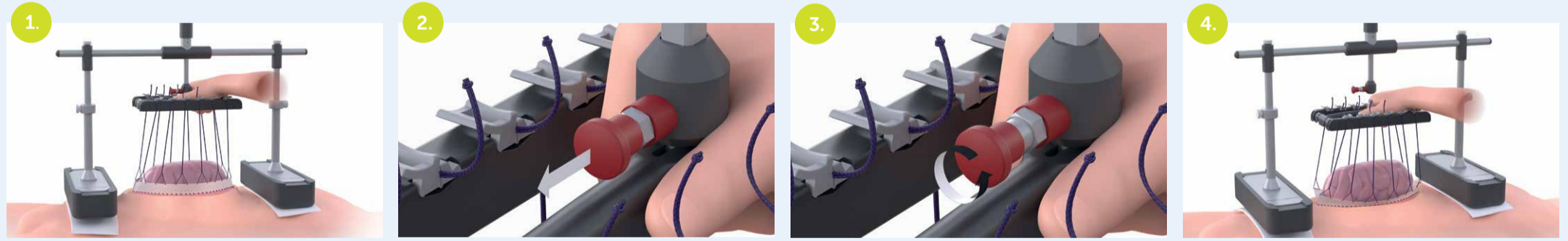

Sütür tutucuyu bir elinizle sabitleyin.

Kırmızı kilitleme civatasını çıkarın.

90° çevirin.

Sütür tutucu gevşek ve aşağı doğru çıkarılabilir.

## İlave güvenlik bilgileri

Temas yüzeyleri sadece intakt cilde uygulanabilir.

Temas yüzeylerinin altına örn. kablolar, elektrotlar, besleme veya deşarj hatları gibi yabancı cisimlerin sıkışmadığından emin olun.

Temas yüzeylerini her zaman büyük, pürüzsüz emici kompresler veya benzeri pürüzsüz malzemelerle doldurun.

Ürün genital bölgenin üzerine yerleştirilmemelidir.

Cilt tahriş olmasını önlemek için, yaklaşık 5 saatlik çekme aralıkları ve ardından bir saatlik çekme molası öneriyoruz.

Video kılavuz



**fasciotens**  
ABDOMINAL WALL SOLUTIONS

Lütfen kullanım talimatına uyun!

# fasciotens

ABDOMINAL WALL SOLUTIONS



**fasciotens GmbH**

Moltkeplatz 1  
D-45138 Essen | Germany

**www.fasciotens.de**

info@fasciotens.de  
Tel. +49 221 17738500

**Destek:**

support@fasciotens.de  
Tel.: +49 221 17738500

**fasciotens GmbH**

Aachener Str. 1053-1055  
D-50858 Köln | Germany